

EMS MASSAGEAPPARAAT

FOOTPAD



Technische specificatie:

Productnaam	EMS voetmassageapparaat
Spanning	Alkalinebatterij 1,5 V, 2x AAA
Modi	6 (A-F)
Frequentie	1-100 Hz
Uitgang	8 mA
Maat	32x29 cm
Gewicht	57,4 g

Pakket bestaat uit:

Main Device(FRONT)

Main Device(REAR)

Foot Mat

Including:

1* Main Device

1* User Manual

1* Foot Mat

2* AAA Batteries(Selection)

Hoofdapparaat (VOORKANT)
Hoofdapparaat (ACHTERKANT)

Voetmat
Inbegrepen:
1* hoofdapparaat
1* gebruikershandleiding
1* voetmat
AAA-batterijen niet inbegrepen

Het apparaat schakelt automatisch uit na 12 minuten gebruik.

Het apparaat schakelt automatisch uit als u uw voeten niet op de mat zet.

Waarschuwingen:

Dit product mag nooit worden gebruikt om pijn te verlichten waarvoor geen diagnose is gesteld, dit is geen medisch hulpmiddel. Raadpleeg uw arts voordat u pijnklachten behandelt.

Gebruik een lage intensiteit en een kortere gebruiksduur om overstimulatie te voorkomen.

Buiten bereik van kinderen en huisdieren houden.

Dit product is niet waterdicht, niet onderdompelen of in contact brengen met water.

Gebruik de producten niet als u een medische aandoening aan uw voeten heeft of wonden in dit gebied.

Gebruik dit product alleen voor het beoogde doel.

Gebruik alleen bij het product geleverde accessoires.

Gebruik het apparaat niet op plaatsen met een hoge vochtigheidsgraad, zoals een badkamer.

Laat het apparaat niet in contact komen met metaal, zoals juwelen.

Gebruik het apparaat niet op enig ander lichaamsdeel of specifiek op delen die een tatoeage of plastic of metalen implantaat hebben, waaronder ook gezicht, borst, ruggengraat en schouders.


Niet gebruiken als u zwanger bent, een hartziekte heeft, een pacemaker of geïntegreerde defibrillator heeft, een diepe veneuze trombose heeft of een hoge bloeddruk.

Hoe te gebruiken:



Schuif het batterijdeksel van het hoofdapparaat
Installeer 2 stuks AAA batterijen correct
Bevestig het hoofdapparaat op de voetmat
Zet uw voeten op de mat (moeten blote voeten zijn)
Druk op de toets "ON/INC" om in te schakelen
Druk op de toets "Program" om uw programma te kiezen
Druk op de toets "ON/INC" om de intensiteit te verhogen of op de toets "OFF/DEC" om de intensiteit te verlagen
Ontspannen en genieten

Modi:

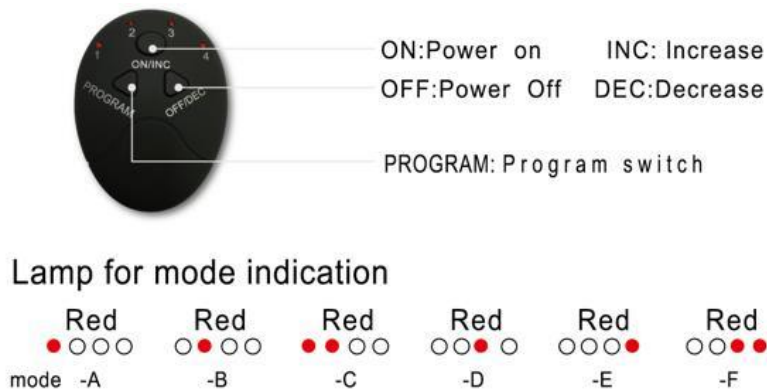

ON: Aanzetten
OFF: Uitschakelen
INC: Verhogen
DEC: Verlagen
PROGRAM: Modusschakelaar
Lampen voor modusaanduiding
Rood
modus

Recycling- en wegwerpinstructies

 Deze markering geeft aan dat dit product in de hele EU niet met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid te voorkomen; recycle het op verantwoorde wijze om het duurzame hergebruik van materialen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat te retourneren, gebruikt u het retour- en ophaalsysteem of neemt u contact op met de winkel waar het product is gekocht. Zij kunnen dit product meenemen voor milieuveilige recycling.

 Verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de eisen van de toepasselijke EG-richtlijnen.